

Toiletverhoger / Raised Toilet Seat / Toilettensitzerhöhung

Onderdelen:

- 1x Toiletverhoger (A)
- 2x L-vormige beugels (B)

Parts:

- 1x Raised Toilet Seat (A)
- 2x L-shaped brackets (B)

Teile:

- 1x Toilettensitzerhöhung (A)
- 2x L-förmigen Halterungen (B)



INSTALLATIE INSTRUCTIES - Maximaal gebruikersgewicht: 160 KG

- Plaats de Dunimed Toiletverhoger (A) ondersteboven op een vlakke ondergrond en schuif een van de L-vormige beugels (B) in een van de sleuven aan de zijkant van de toiletverhoger (Afbeelding 1). Duw lichtjes op de beugel en draai de knop met de klok mee totdat de beugel vastklikt. Herhaal deze stap met de andere beugel.
- Draai de knoppen van de beugels totdat de beugels wijder staan dan de breedte van de toiletpot.
- Plaats vervolgens de Toiletverhoger op de wc-bril. Past deze niet? Verwijder dan de huidige toiletbril (afbeelding 2) en plaats de Dunimed Toiletverhoger op de toiletpot. Aangeraden is om uw huidige toiletbril te verwijderen.
- Draai de beugels vast, totdat deze niet meer verder vast kunnen worden gedraaid.
- De Dunimed Toiletverhoger is correct gemonteerd zoals weergegeven op afbeelding 3.
- Check regelmatig of de beugels nog goed vastzitten. Zo niet, draai deze dan weer aan.


1



INSTALLATION INSTRUCTIONS - Weight capacity: 350 LBS (160 KG)

- Place the Dunimed Raised Toilet Seat (A) upside down on a flat surface and slip one of the L-shaped brackets (B) into one of the slots in the side of the raised toilet seat (Picture 1). Push lightly on the bracket and turn the knob clockwise until the thread engages. Repeat with the second bracket on the other side.
- Turn the knobs until the brackets are farther apart than the width of the toilet bowl.
- Then place the Dunimed Raised Toilet Seat on the existing toilet seat. Does it not fit? Then remove the current toilet seat (picture 2) and place the Dunimed Toilet booster on the toilet bowl. It is recommended that you remove your current toilet seat.
- Tighten both brackets until they are snug against the bowl.
- A properly positioned Dunimed Raised Toilet Seat is shown in picture 3.
- Regular checks of the brackets should be made, ensuring that the Raised Toilet Seat is secure.

2

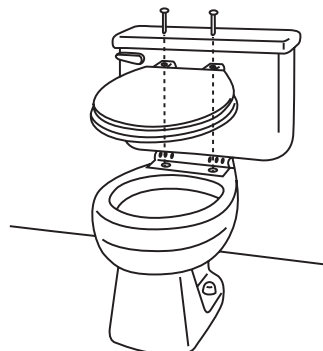

INSTALLATIONSANLEITUNG - Gewichtskapazität: 350 LBS (160 KG)

- Stellen Sie den Toilettensitzerhöhung (A) umgekehrt auf eine ebene Fläche und schieben Sie eine der L-förmigen Halterungen (B) in einen der Schlitze an der Seite des Toilettensitzerhöhung (1). Drücken Sie leicht auf die Halterung und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis das Gewinde einrastet. Wiederholen Sie mit der zweite Halterung.
- Drehen Sie die Knöpfe, bis die klammern weiter auseinander liegen als die Breite der Toilettenschüssel.
- Setzen Sie dann den erhöhten Dunimed Toilettensitzerhöhung auf den vorhandenen Toilettensitz. Passt er nicht? Dann entfernen Sie den aktuellen Toilettensitz (bild 2) und setzen Sie die Dunimed Toilettenerhöhung auf die Toilettenschüssel. Es wird empfohlen, den aktuellen Toilettensitz zu entfernen.
- Ziehen Sie die Halterungen fest, bis sie nicht mehr weiter gedreht werden können.
- Die Toilettensitzerhöhung ist richtig montiert, wenn sie wie in Bild 3 gezeigt montiert ist.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Halterungen noch sicher befestigt sind. Wenn nicht, schalten Sie es wieder ein.

3



Waarschuwingen / Cautions / Warnungen

- Alle onderdelen kunnen worden schoongemaakt met sop en water (90°C MAX).  All parts can be cleaned with soapy water (90°C MAX).  Alle Teile können mit Seifenwasser (90°C MAX) gereinigt werden.
- Pak de toiletverhoger niet vast als ondersteuning wanneer u gaat zitten, en gaat staan.  Do not grab the raised toilet seat as support when you sit down, and stand up.  Greifen Sie beim Hinsetzen und Aufstehen nicht nach der Toilettenbrüstung als Stütze.
- Wees er zeker van dat de toiletverhoger goed is bevestigd aan de toiletpot voordat u gaat zitten.  Be sure the toilet riser is properly attached to the toilet bowl before sitting down.  Vergewissern Sie sich vor dem Hinsetzen, dass die Toilettensitzbank richtig befestigt ist.